

FAUTEUIL DENTAIRE A 05 CORDONS

ASO


**Human-centered
design** philosophy
creates higher value
for you

人性化设计理念, 为你创造更高价值

MODLE
KS-R3





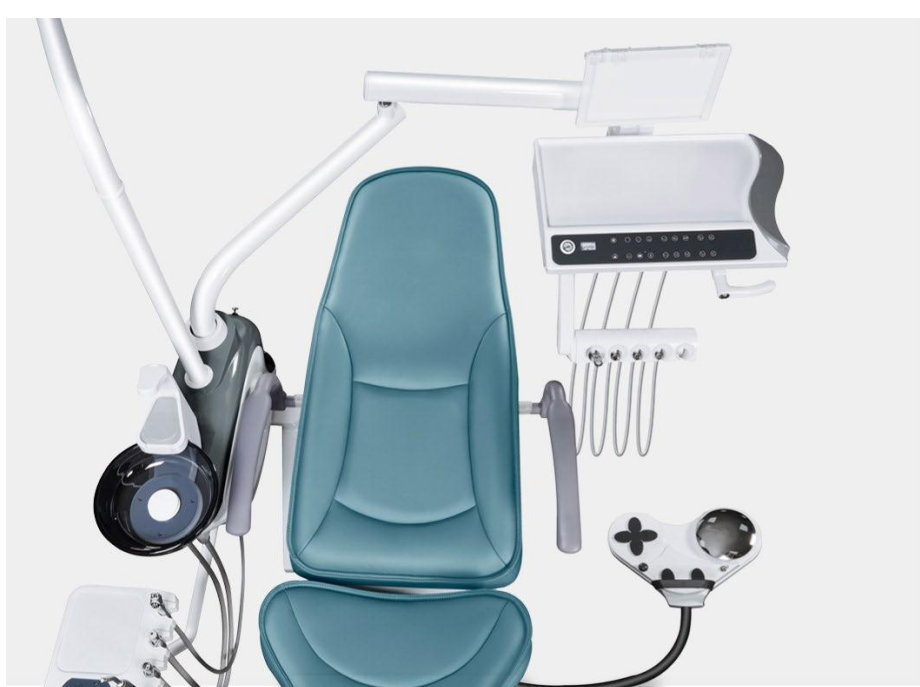

LINKAGE CHAIR FRAME

ASO

SEE SIMPLICITY AS
BEAUTY
QUALITY AS LUXURY

以简为美 以质见奢



Le fauteuil dentaire **KASO**, unité dentaire contient la solution technique intégrée pour les dentistes.

Ce fauteuil est un modèle innovateur de design agréable avec une ligne moderne et arrondie pour le grand confort du patient et de praticien, simple à utiliser, facile à nettoyer et à désinfecter.

Description technique:

- Conception ergonomique, mouvement synchronisé entre le siège et le dossier.
- Mouvement électromécanique

CONSOLE PRATICIEN 05 CORDONS:

- Cordons canne à pêche
- 01 Détartreur à ultrason avec 05 inserts
- 01 Seringue air / eau
- 02 Module Turbine 04 trous
- 01 Module Micro Moteur à air 02 trous
- Lecture de cliché (NEGATOSCOPE)
- 03 positions programmées pour 03 praticiens
- Position de rinçage et retour à la dernière position
- Fonction de remise à zéro automatique
- Large dossier
- Siège anatomique avec la sellerie cuir
- Appui – tête à double articulation, réglable en hauteur
- Accoudoir gauche fixé et droit pivotant
- Plateau porte instrument
- Camera intra buccale avec écran

CONSOLE ASSISTANT

- La console de l'assistant est orientable avec commande pour les mouvements du fauteuil, elle contrôle la dérogation d'eau, du verre et de l'eau dans le crachoir,
Cette console contient quatre emplacements montés sur un bras articulé :
- 01 Tubes d'aspiration chirurgicale avec filtres. puissante adaptée à vos besoins
- 01 TUBE d'aspiration salivaire de haute puissance.
- 01 Lampe à polymérisation **KASO**, 03 programmes temps / puissance
- 01 seringue à air / eau chaude et froide

Unité hydrique :

- Le Groupe hydrique est extrêmement compact tournant de 45 °, il libère de l'espace habituellement non disponible. Cela permet de disposer d'un plus grand nombre d'options opérationnelles, ce qui facilite le travail de l'équipe médicale.
- Crachoir de luxe en verre tournant de 90 ° pour un rinçage sûr et facile des patients, Un rinçage automatique du crachoir et un système de contrôle de remplissage de tasse
- Remplissage de verre et jet de cuvette temporisé flux et temps
- Réservoir d'eau
- Réservoir désinfectant
- Filtre d'eau
- Filtre d'air

PROTOCOLES D'HYGIENE PRATIQUES :

Accès et nettoyage faciles de toutes les surfaces pour une gestion optimale de l'hygiène. Programmes de rinçage intégrés ainsi que l'unité d'hygiène avec adaptateur intégré

Et amovible pour instruments et tuyaux d'aspiration, pour un nettoyage et une désinfection automatisés qui font gagner du temps.

L'acier inoxydable résistant du crachoir de rinçage et des lavabos de remplissage de gobelet peut être stérilisé pour une hygiène totale. Le crachoir est également détachable et peut être nettoyé et désinfecté après chaque traitement.

La Boîte d'alimentation est installée à l'extérieure du fauteuil (ON / OFF, tension, eau et air), elle est équipée de 02 régulateurs de pression (air / eau), 02 manomètres et 06 fusibles de protection et cela pour assurer un maximum de sécurité au fauteuil.

Tabouret :

Tabouret praticien anatomique avec deux réglages de travail : hauteur assise et inclinaison dossier.



W061-33



W062-13



W062-39



W063-7



W063-22



W063-23



W068-11



W068-13

SCIALYTIQUE: Éclairage LED

Une lumière d'opération à l'équilibre parfait, qui offre une vue dégagée des dents traitées en même temps qu'une atmosphère plaisante pour vous et le patient -L'éclairage LED et son design moderne permet de mettre en valeur la perception naturelle de la lumière et de limiter les ombres dans la zone de travail sont faits pour vous. Les éclairages LED s'éteignent automatiquement lorsque le fauteuil est en mouvement afin de protéger les yeux des patients.

Lampe à triple intensité LED, luminosité réglable avec allumage manuel ou automatique à infrarouge réglable trois intensité.

Caméra

Caméra endorale.



Instruments rotatifs :



1 turbines

1 micromoteur

1 contre angle

1 pièce à main



Spécifications :

- Tension : 220V-50HZ Pression d'eau : 02bar-4bar
- Courant nominal : 10A Pression

COMPRESSEUR 30 L SILENCIEUX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Consommation électrique : 220 V / 50 Hz
- Courant électrique : 2.4 C
- Fréquence : 750 Watt
- Puissance : 70 l/ minute
- Capacité de décharge : 0.8
- Volume d'air : 30 litres
- Bruit : 56-65 db

